

Установка и обновление программы MarCS Engineer.


www.nedratest.ru

Внимание!

Доступ к разделу сайта для загрузки программы, доступен только зарегистрированным пользователям.



===== Установка программы =====


- 1 Скачайте с сайта архив с программой MarCS.
2. Распакуйте архив в удобный для Вас каталог. Пароль для архива указан на сайте
3. Запустите на выполнение файл MarCS_setup.exe. Следуйте инструкциям установщика.

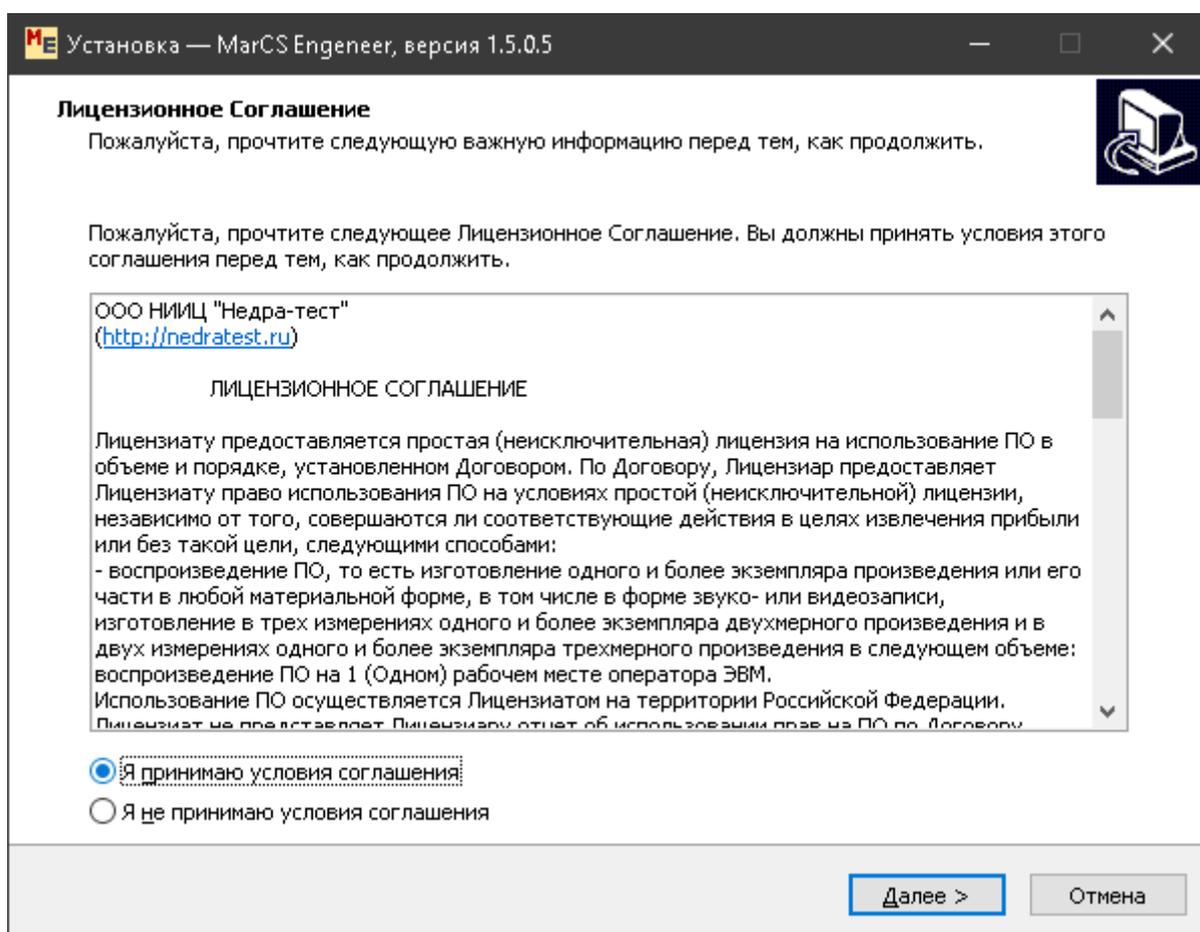


Примите условия Лицензионного соглашения, нажав кнопку «Принять». В противном случае откажитесь от установки ПО.

Выберите путь для установки программы или оставьте предложенный вариант и нажмите кнопку «Извлечь»

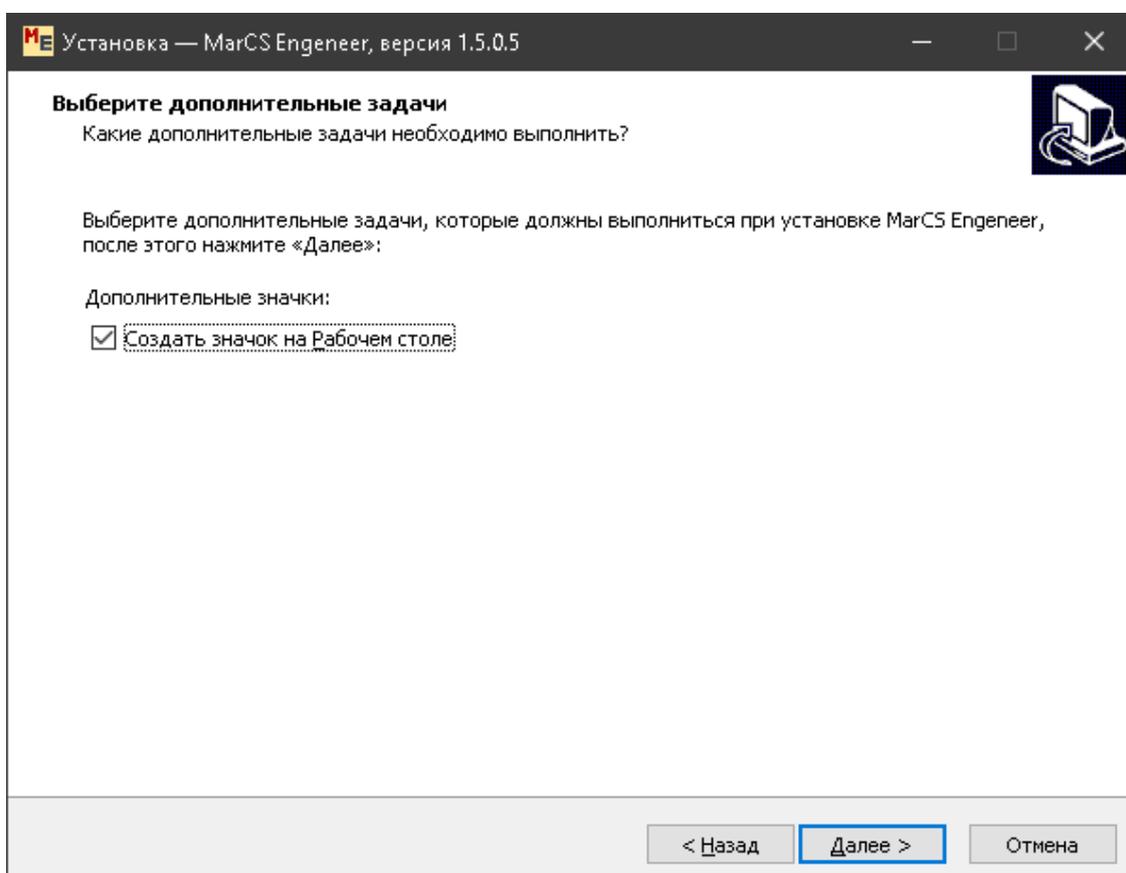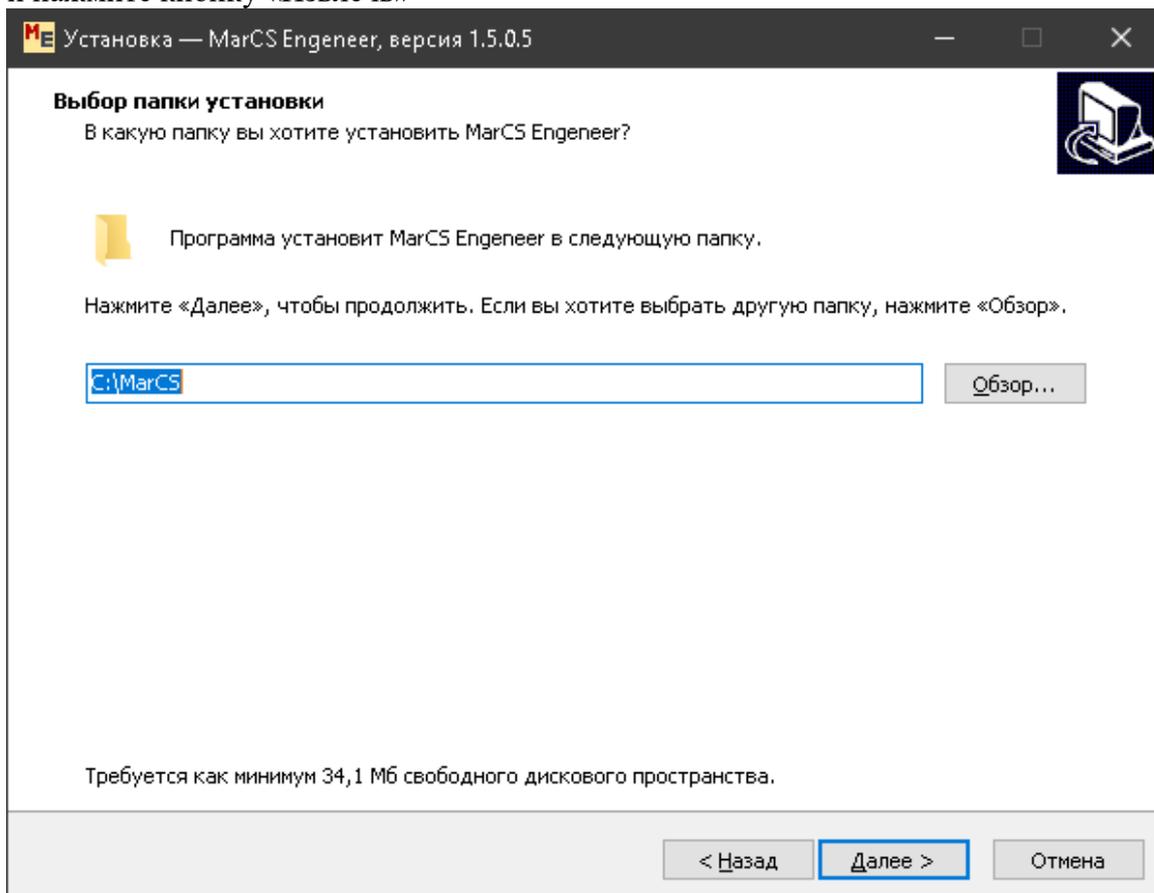

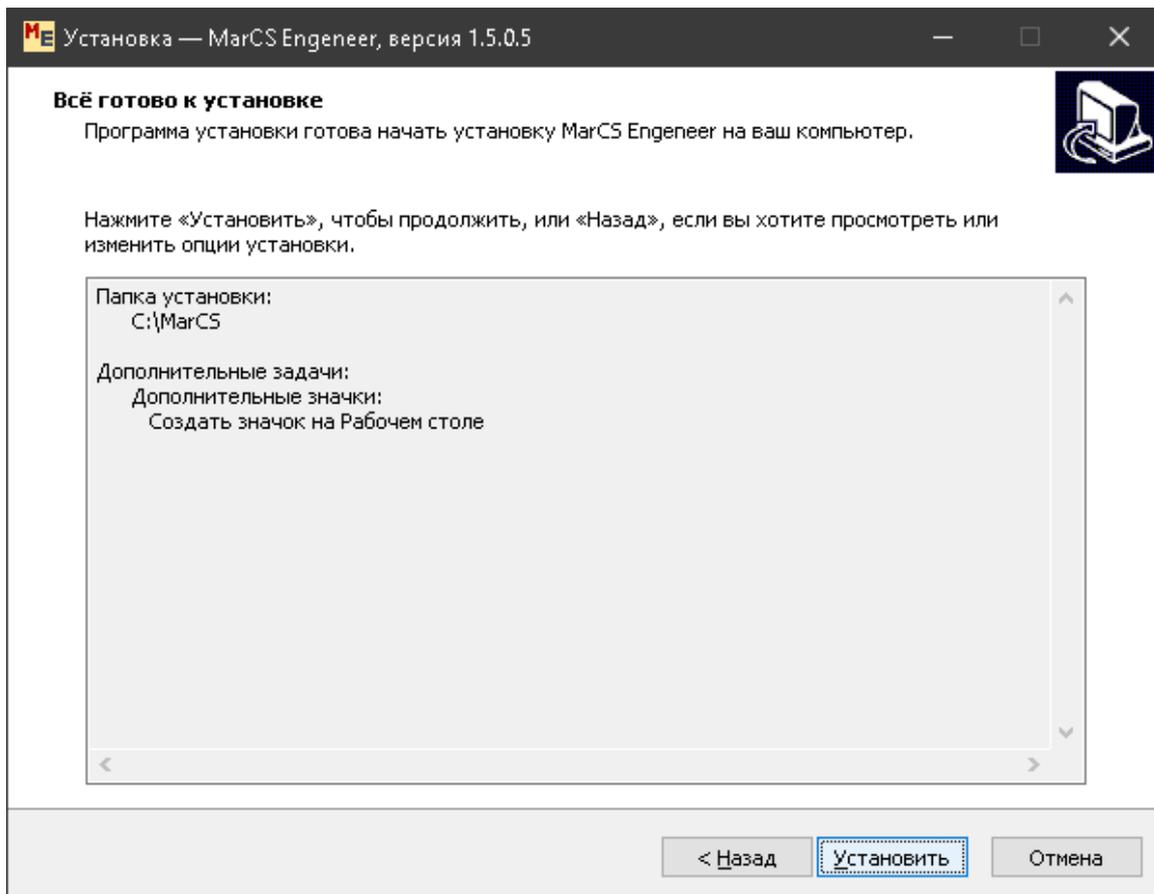


После установки основных файлов, будет предложена установка драйверов для ключа защиты.

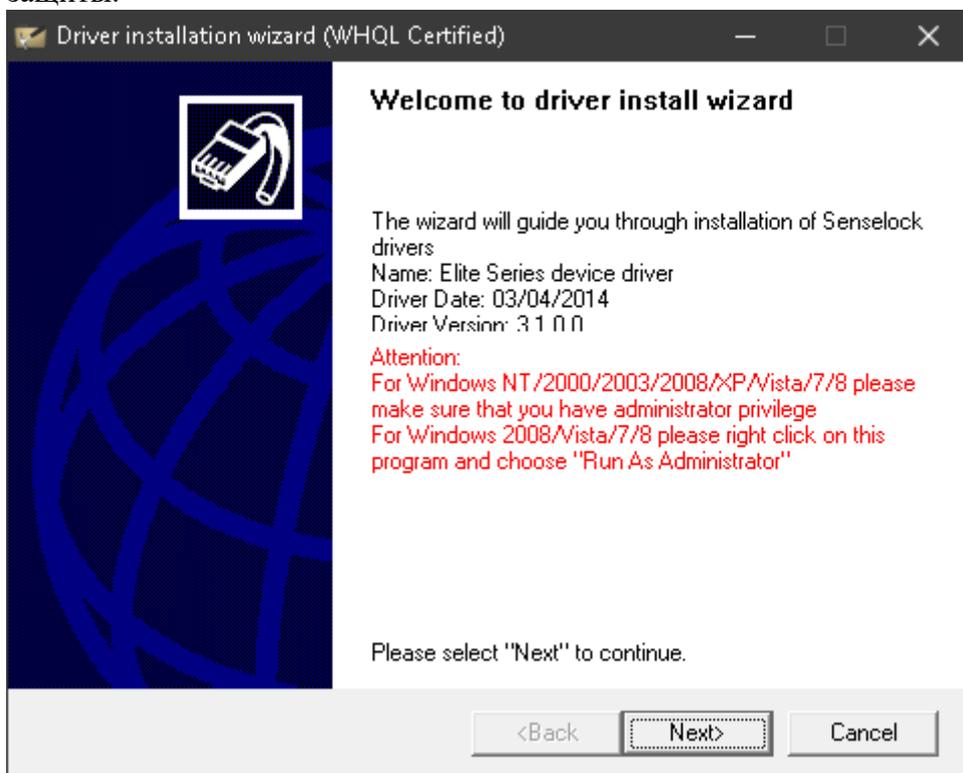


Нажмите кнопку «Next» для продолжения установки


На следующем этапе нажмите кнопку «Next»

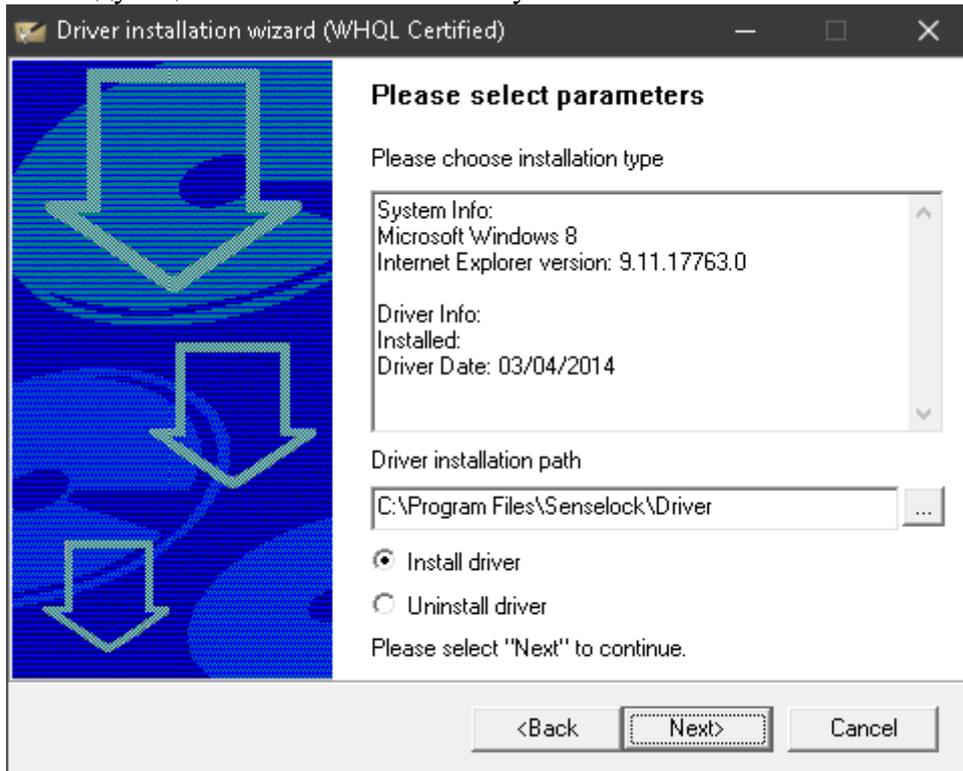

После установки драйверов ключа, нажмите кнопку «Finish»

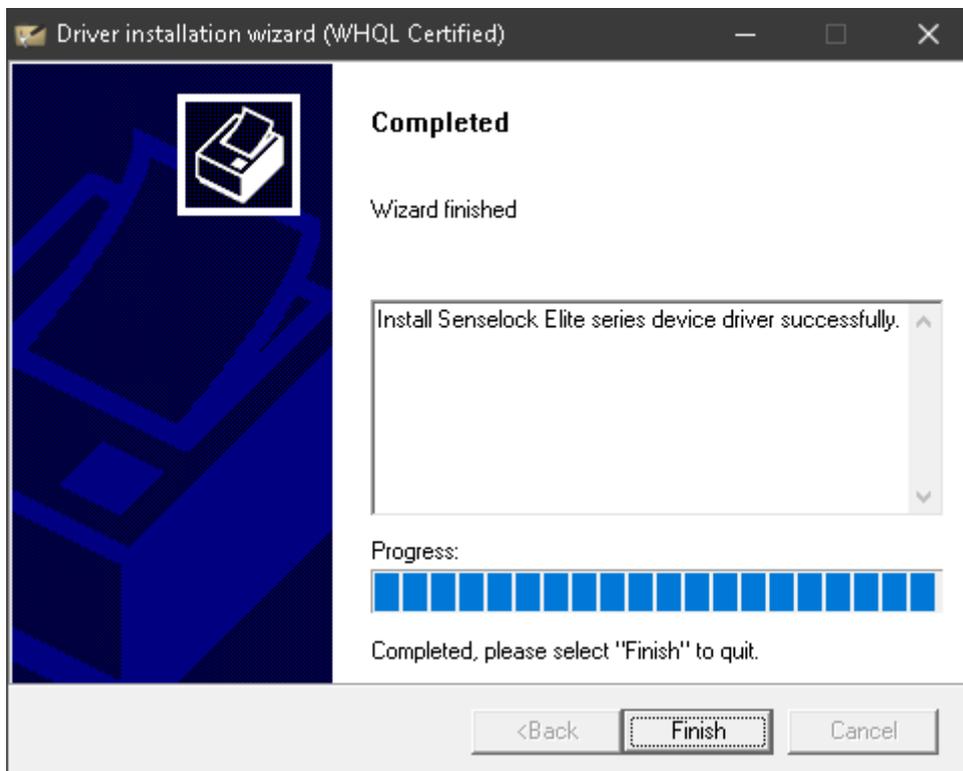

После установки на рабочем столе появятся ярлыки программы и инструкции по эксплуатации.

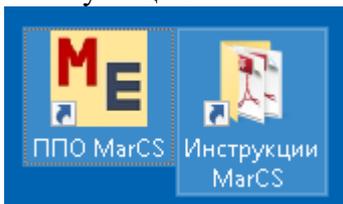

Вставьте ключ защиты в свободный USB разъем.

Запустите программу.

Удачной работы!

Обновление программы **MarCS Engeneer!**

www.nedratest.ru

1. Закройте программу MarCS, если она была открыта.
2. Скачайте с сайта архив с программой MarCS.
3. Переименуйте папку с ранее установленной программой (например C:\MarCS -> C:\MarCS_OLD_10062020), чтобы не потерять ранее введенные данные по проектам.
4. Распакуйте архив в удобный для Вас каталог. Пароль для архива указан на сайте
5. Запустите на выполнение файл MarCS_setup.exe. Следуйте инструкциям установщика.

Будет выполнена установка программы и установка драйвера для ключа защиты, как в первой части инструкции.

Вставьте ключ защиты в свободный USB разъем.

Запустите программу.

ВНИМАНИЕ!!!

Если обновление предполагает изменение структуры БД для хранения данных, то информация по этому вопросу будет дополнительно представлена на сайте, в разделе загрузок!

Следите за обновлениями!

Удачной работы!